


## 10 Шигтгээ санамж: Интервеншл шинжилгээний үед хүүхдийн цацрагийн хамгаалалт

**1. Санамж: Хүүхдийн эд эрхтэн насанд хүрсэн хүнийхээс илүү цацраг туяанд мэдрэг байдаг.**

**Цацрагийн нөлөө, үйлчлэл нь хүүхдийн амьдралын урт хугацаанд үргэлжилнэ.**

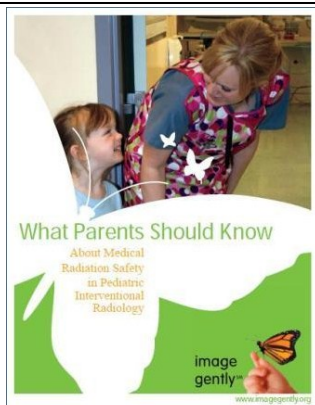

**2. Шинжилгээ хийхийн өмнө эцэг эхтэй нь ярилцах**

- Урд хийгдсэн цацрагийн шинжилгээний явцад авсан цацрагийн шарлагын талаар асуух
- Тэдэнд цацрагийн аюулгүй байдлын талаар тайлбарлах

image gently

Patient's Name \_\_\_\_\_ MR# \_\_\_\_\_ Date of exam \_\_\_\_\_

**Step Lightly Checklist**

Review steps below before starting the procedure.


Safety is a team effort: don't be afraid to ask the necessary questions to ensure you are working as a team to keep radiation dose to patients and staff as low as possible.

Reducing radiation dose must be balanced with safe, accurate and effective completion of the procedure. Not all the steps below may be possible in each case, depending on patient size, technical challenge and critical nature of the procedure. Overall patient safety is most important. The goal is to minimize the dose to the patient while providing important and necessary medical care.

- ☐ Ask patient or family about previous radiation (record card downloadable at this link). Answer questions about radiation safety (parent/patient brochure downloadable here).
- ☐ Use ultrasound when possible.
- ☐ Position hanging table shields and overhead lead shields prior to procedure with reminders during the case as needed.
- ☐ Operators and personnel wear well fitted lead aprons, thyroid shield and leaded eye wear.
- ☐ Use pulse rather than continuous fluoroscopy when possible, and with as low a pulse as possible.
- ☐ Position and collimate with fluoroscopy off, tapping on the pedal to check position.
- ☐ Collimate tightly. Exclude eyes, thyroid, breast, gonads when possible.
- ☐ Operator and personnel hands out of beam.
- ☐ Step lightly: tap on pedal and review anatomy on last image hold rather than with live fluoroscopy when possible; minimize live fluoroscopy time.
- ☐ Minimize use of electronic magnification, use digital zoom whenever possible.
- ☐ Acknowledge fluoroscopy timing alerts during procedure.
- ☐ Use last image hold whenever possible instead of exposures.
- ☐ Adjust acquisition parameters to achieve lowest dose necessary to accomplish procedure: use lowest dose protocol possible for patient size, lower frame rate, minimize magnification, reduce length of run.
- ☐ Plan and communicate number and timing of acquisitions, contrast parameters, patient positioning and suspension of respiration with radiology and sedation team in advance to minimize improper or unwanted runs.
- ☐ Move table away from X-ray tube in both planes. Move patient as close to detector in both planes.
- ☐ Use a power injector, or extension tubing if injected by hand.
- ☐ Move personnel away from table or behind protective shields during acquisitions.
- ☐ Minimize overlap of fields on subsequent acquisitions.
- ☐ After procedure: record and review dose.

**3. Багийн гишүүдийнхээ шинжилгээний өмнөх аюулгүйн шалгах хуудсыг хэрэглэх талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх**

**4. Шинжилгээг нарийвчлан төлөвлөснөөр үр хөврөлийн буруу хөгжил, үр зулбах болон давтан шарлага авахаас сэргийлэх**

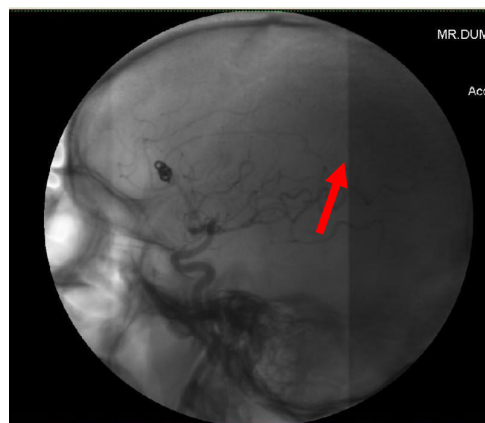

[http://www.pedrad.org/associations/5364/files/ImGen\\_StpLight\\_Chcklst.pdf](http://www.pedrad.org/associations/5364/files/ImGen_StpLight_Chcklst.pdf)



**5. Өвчтөний бамбай булчирхай, цээж, нүд, үрийн булчирхайг хамгаалах**



**RPOP-ийн вэб хуудсан дахь зурагт хуудсууд!**

<https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/AdditionalResources/Posters/index.htm>




Хуудас 1.2  
Интервеншл шинжилгээний үе дэх хүүхдийн цацрагийн хамгаалалт

<http://rpop.iaea.org> <http://www.pedrad.org/associations/5364/ig/>

# 10 Шигтгээ санамж: Интервеншнл шинжилгээний үед хүүхдийн цацрагийн хамгаалалт


## 6. Тохирсон техник ашиглах:

- Бага үзүүлэлтийн хүчин чадал ашиглах боломжтой бол секундэд 7.5-3 пульс хүртэл бууруулах
- Боломжтой бол балчир хүүхдийн биеийн жин 20 кг-аас бага тохиолдолд аппаратны шүүгч торыг авах, агаарын зайн аргыг оронд нь ашиглах
- Дүрс харах хугацааг багасгах
- Тухайн клиникийн зураг авах талбайг хамгийн бага байхаар тохируулах
- Коллиматорийг байнга, оновчтой ашиглах
- Дүрсний

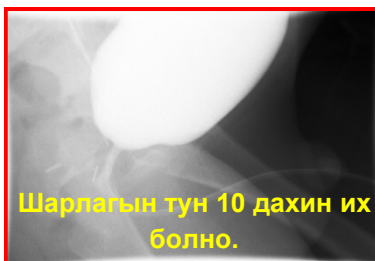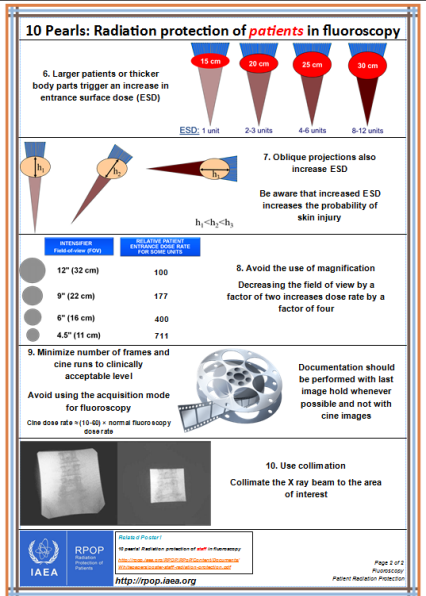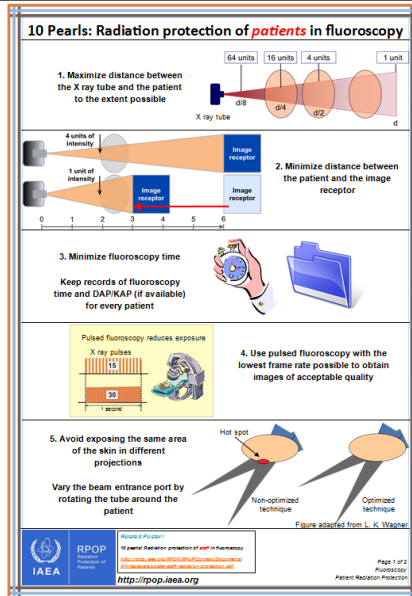


## 7. “Сүүлчийн зураг» хадгалах горимыг ашиглах нь нэмэлт шарлага өгөхгүй байх сайн талтай.


## 8. Өвчтөн болон рентген хоолойн хоорондын зайг ихэсгэж дүрс хүлээн авагч болон өвчтөн хоорондын зайг багасгах

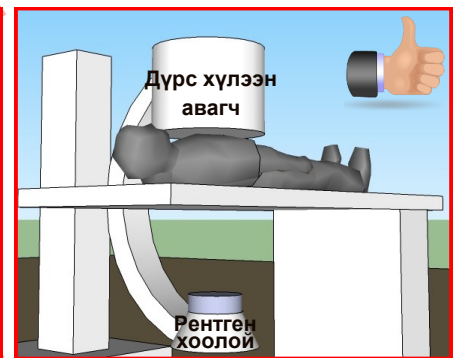

## 9. Тун бүртгэгч болон тунг бууруулах технологи хэрэглэх

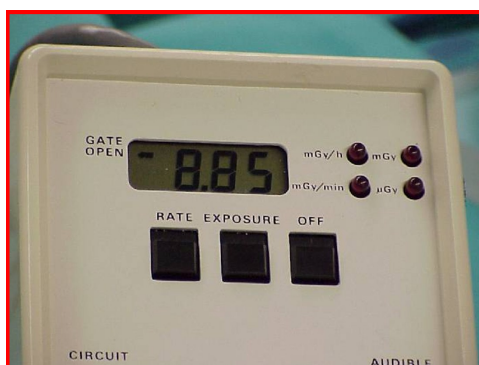

## 10. Шинжилгээ дууссаны дараа цацрагийн тунг нягтлах, хадгалах

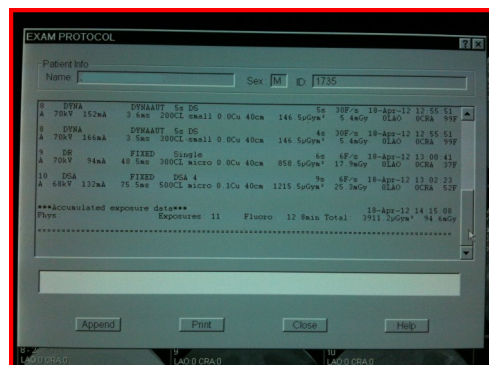

RPOP-ийн вэб хуудсан дахь зурагт хуудсууд!

<https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/AdditionalResources/Posters/index.htm>

Хуудас 2.2  
Интервеншнл шинжилгээний үед цацрагийн хамгаалалт